

medAS Endo Protect System®

- Qualität und Perfektion
- Wirtschaftlich
- Hygienisch
- Optimierter Workflow

**Das Logistiksystem für
Ihre Endoskope**



Produkteigenschaften - Hygiene:

Glatte und frei zugängliche Oberflächen - einfache und **effektive Wischdesinfektion**

Pendelschutz und Handgriffaufnahme tauch-, wisch- und thermisch (bis 95°C) desinfizierbar

Staubschutz - Dichtungen verhindern Eindringen von Staub

Pendelschutz und Handgriffaufnahme tauch- / wischdesinfizierbar

Steckerhalter mit weichem Kunststoffüberzug

Für alle **VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel** freigegeben

Weitere praxisorientierte Lösungen:

Bei Endoskopen ohne Kanäle Kombinationen mit Wischdesinfektionstuchablagen am Rollständer / Gerätewagen



Produkteigenschaften - Wirtschaftlichkeit:

Die Reparatur kostet in der Regel 50% des Neupreises!

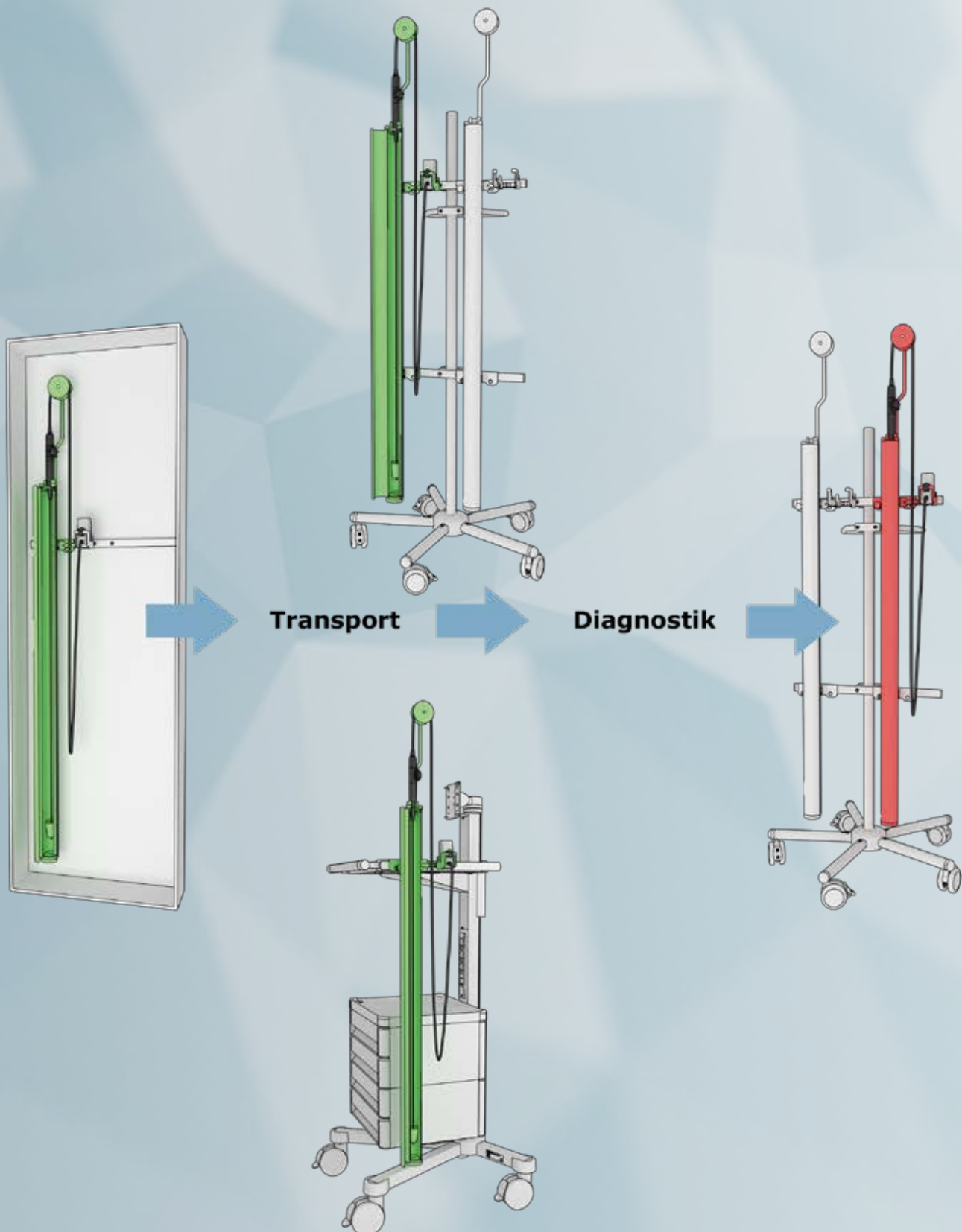
medAS Endo Protect System® verhindert typische Schäden an:

- Optik durch Pendelschutz
- Stecker durch angepasste Steckerhalter mit weicher Beschichtung



Produkteigenschaften - Das Mobilitätskonzept:

Mobile Aufbewahrungseinheiten ermöglichen das Umsetzen der Halterung mit Sonde von Geräteschiene zu Geräteschiene



Einsatz am Gerätewagen

- Entnahme und Transportfunktion
- Endoskop geschützt vor Kontamination und Beschädigung
- Für alle Längen von 50 – 170cm
- Mit Steckeraufnahmen in unterschiedlichen Höhen
- Auch für Endosonoskope geeignet



Produkte

Aufbewahrung stationär/mobil

Einsatzgebiet:

- Aufbewahrung von Endoskopen aller Hersteller und aller Längen
- Fix montiert im Schrank / Wand
- Mobil - transportabel, Lagerung und Vorhaltung des Endoskopes **am Gerätewagen / Notfallwagen**

Produkthighlights:

- Staubschutz
- Geschützter Transport
- Schutz vor Beschädigung
- Optimale Hygiene

Variationen:

- Farbcodiert „cleaned“ oder „not cleaned“
- für Wandmontage oder zum Transport
- mit Abstützung für die Versorgungsleitung rechts oder links
- Handgriffstützung bei **Videoendoskopen**
- Diverse Steckergrößen höheneinstellbar.

Auch mit zwei Steckerhalter für Sonoskope ausstattbar



Produkte – mobile Airway-managementsysteme

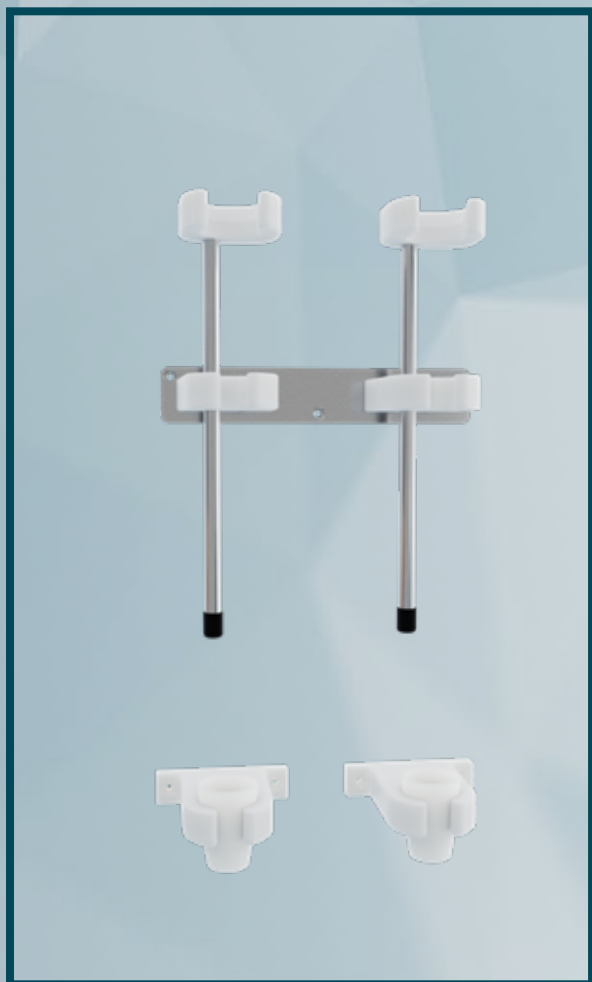
- geschützte Vorhaltung bei sofortiger Verfügbarkeit am Airwaymanagementwagen
- perfekte Kombination mit Endoskopmonitoren möglich
- Sichtmonitor optimal über dem Patientenkopf positionierbar
- Sicherstellung einer **sofortigen Verfügbarkeit in Notfällen**
- Transport in der Aufbewahrungseinheit möglich
- Staubschutz in der Aufbewahrungseinheit



Halterungen für den Schrankeinbau (Bronchoskope / Laryngoskope)

- Optimale und sichere Aufhängung
- Pendelschutz (thermodesinfizierbar) zum Schutz der Optik
- Verschiedene Aufnahmen für Versorgungsstecker möglich

Neu: Lagerungsschränke abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse – Fragen Sie uns!



ZERTIFIKAT

über antimikrobielle Eigenschaften von Werkstoffen für die
Produkte

Steriface-Pulver EP/PE 568X / Steriface-Pulver EP/AC 569X
(Neu und nach 10.000 Wischzyklen)

der Firma

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Str. 14, 59423 Unna, Deutschland

Wurde erfolgreich gegen die Bakterienstämme
Escherichia coli DSM 1576 / ATCC8739
Staphylococcus aureus DSM 799 / ATCC 6538
Staphylococcus aureus MRSA DSM 21979

als **antibakteriell** geprüft
(≥ 99,99% Keimreduktion)

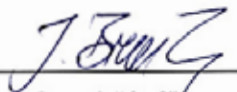
gemäß ISO 22196 (modifiziert)

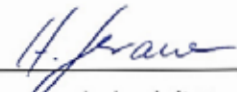
Einzelheiten siehe Prüfberichte Nr. 2707.1 / 170215-10267-22196-01; Probe: 102671002140003,
102671002140005; 2799.1 / 170425-10267-22196-04; Probe: 102672004170013, 102672004170015; 2799.3 /
170425-10267-22196-03; Probe: 102672004170013, 102672004170015; 2707.2 / 170215-10267-22196-02;
Probe: 102671002170008, 102671002140010; 2799.2 / 170425-10267-22196-01; Probe: 102672004170018,
102672004170020; 2799.4 / 170425-10267-22196-02; Probe: 102672004170018, 102672004170020

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflächen aus dem
geprüften Werkstoff mit folgendem Zeichen zu versehen



Nürnberg, 09. Mai 2017


Geschäftsführer


Laborleiter

QualityLabs BT GmbH, Neumeyerstraße 46a, 90411 Nürnberg

Der Erteiler des Zertifikates ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflaboratorium für
Medizinprodukte zur Prüfung antimikrobieller und adhäsiver Oberflächeneigenschaften von
Werkstoffen.

Registernummer: D-PL-13335-01-00 / ZLG-AP-231.10.72
Kompetenznachweis nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und DIN EN ISO/IEC 17025.

ZERTIFIKAT nach ISO 22196

ZERTIFIKAT

über antimikrobielle Eigenschaften von Werkstoffen für die
Produkte

Steriface-Pulver EP/PE 568X / Steriface-Pulver EP/AC 569X
(Neu und nach 10.000 Wischzyklen)

der Firma

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Str. 14, 59423 Unna, Deutschland

Wurde erfolgreich gegen das Pilzgemisch

Aspergillus niger DSM/1988

Penicillium funiculosum DSM 2213

Aureobasidium pullulans IHEM 18556

als **antimykotisch** geprüft

(kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar)

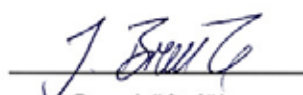
gemäß ISO 846 (Methode A) (modifiziert)

Einzelheiten siehe Prüfberichte Nr. 2707.3 / 170228-10267-846-01

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflächen aus dem
geprüften Werkstoff mit folgendem Zeichen zu versehen



Nürnberg, 09. Mai 2017


Geschäftsführer


Laborleiter

QualityLabs BT GmbH, Neumeyerstraße 46a, 90411 Nürnberg

Der Erteiler des Zertifikates ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflaboratorium für
Medizinprodukte zur Prüfung antimikrobieller und adhäsiver Oberflächeneigenschaften von
Werkstoffen.

Registernummer: D-PL-13335-01-00 / ZLG-AP-231.10.72
Kompetenznachweis nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und DIN EN ISO/IEC 17025.

ZERTIFIKAT nach ISO 846

Nummernschlüssel für Aufbewahrungssysteme Modellreihe „A“ Wischdesinfektion

Modellreihe A -	Korpuslänge =Arbeitslänge max. des Endoskopes	Pendelschutz max. Endoskopdurchmesser	Farbcodierung	Befestigung	obere Abstützung des Endoskopes	Steckerhalter	Position rechts oder links
A-	05: Länge=500mm 07: Länge=700mm 12: Länge=1200mm 14: Länge=1450mm 17: Länge=1750mm	P1: 10mm P2: 23mm	gr =Grün für aufbereitete MP rd =Rot für kontami- nierte MP	-S: Stationär, fixe Verschraubun- g an Rückwand -M: mobil, zur Adaption an Normschienen	-H =obere Handgriffauf- hängung für Endoskope ohne seitliche Versorgungsleitung - Ore/Oli =Abstützun- g für seitlich abgehende Versorgungslei- tung nach rechts/links abgehend	E1 für Steckertypen rund klein E2 für Steckertypen rund groß (bis 65mm) E3 für Steckertypen eckig bis Aussen- durchmesser 63x125	re li

Konfigurationsbeispiele:

Videobronchoskop, Arbeitslänge 650mm, Durchmesser Teil 8mm für aufbereitete MP, mobile Aufbewahrung:
A-07P1gr-M-H

Gastroskop, Arbeitslänge 1150mm, Durchmesser 10mm, für aufbereitete MP, stationäre Aufbewahrung,
Versorgungsleitung nach links abgehend, Stecker rund, D60mm
A-12P2gr-S-Oli-E2li

Halterung für Videoendoskope zum Schrankeinbau	
EA-HH-S	Endoskophalterung 2-fach für Videoendoskope ohne Versorgungsstecker zum Schrankeinbau Incl. 2x Pendelschutz entnehmbar, für thermische Desinfektion bis 95°C geeignet
Halterung für Endoskope mit Versorgungsleitung zum Schrankeinbau	
EA-OE1-S EA-OE2-S EA-OE3-S EA-E10-S EA-E20-S EA-E30-S	Endoskophalterung 1-fach für Endoskope mit Versorgungsstecker zum Schrankeinbau. Incl. 1x Pendelschutz entnehmbar, für thermische Desinfektion bis 95°C geeignet Steckerhalter E1 für Versorgungsstecker klein rund Steckerhalter E2 für Versorgungsstecker groß rund Steckerhalter E3 für Versorgungsstecker eckig bis 63x125mm

Weitere Produkte:

**Aufbewahrungs- und Transportsystem
medAS TEE Care System®**



medAS medizinische Arbeitsplatzsysteme GmbH&Co.KG

Lochberg 16,
83135 Schechen

Tel.: +49 (0)8031 7974828
Fax: +49 (0)8031 7979248

Mail: info@medas-systems.de
Web: www.medas-systems.de

Ihr Fachhändler: